



הוראות שימוש



טיפול ראשון באמצעות FaceFX

על העור להיות נקי, יבש, וללא כל אבקה, ג'ל, או קרם.
יש להרים את ידית הטיפול של סילקן FaceFX ממקומה
ביחידת הבסיס.

יש ללחוץ על מתג הכיבוי וההפעלה. נורית החיווי "מוכן/
טיפול" (I) הירוקה תחל להבהב, ולאחר זמן קצר תדלוק
ברציפות.

מכשיר ה FaceFX שלך מוכן לשימוש.
יש להניח את משטח הטיפול על עורך. נורת הLED (LED)
תופעל באופן אוטומטי.

יש להפעיל לחץ קל, תוך הנעה של ידית הטיפול של
FaceFX בתנועות סיבוביות. טמפרטורת משטח הטיפול
תעלה מעט.

יש לבצע את הטיפול במשך 5 עד 7 דקות לכל איזור.
מומלץ למרוח כמות קטנה של קרם לחות על איזורי העור
שטופלו לאחר כל טיפול ולעסות את הקרם בעדינות
בתנועות סיבוביות.



תוכן העניינים

4	לפני שמתחילים.....
4	מהו סילקן FaceFX?.....
4	תיאור מכשיר סילקן FaceFX.....
5	תכולת האריזה.....
6	בטיחות בשימוש בסילקן FaceFX.....
6	מתי יש להמנע משימוש בסילקן FaceFX.....
6	הפחתת הסיכון לפגיעה.....
7	תופעות לוואי אפשריות בשימוש ב FaceFX.....
8	הגנה על הסילקן FaceFX שלך.....
9	טיפול בעור בשיטת ה FaceFX.....
9	היתרונות של סילקן FaceFX.....
9	איזורי טיפול פנים של סילקן FaceFX.....
9	צעדים ראשונים עם סילקן FaceFX.....
9	הכנת מכשיר הסילקן FaceFX.....
9	סעינת הבטריה בסילקן FaceFX.....
10	תכנון השימוש בסילקן FaceFX להשגת תוצאות מיטביות.....
11	טיפול ראשון באמצעות FaceFX.....
12	למה לצפות כאשר משתמשים בסילקן FaceFX?.....
12	לאחר הטיפול בסילקן FaceFX.....
13	תחזוקה של מכשיר הסילקן FaceFX.....
13	ניקוי מכשיר הסילקן FaceFX.....
13	אחסנה.....
13	שמירה על איכות הסביבה.....
13	הוצאת הבטריות הנסענות.....
14	פתרון בעיות.....
16	שירות לקוחות.....
17	מפרט טכני.....
18	תוויות.....


לפני השימוש בסילקן FaceFX בפעם הראשונה, אנא קראו הוראות אלו במלואן. שימו לב במיוחד לסעיפים הנוגעים לנהלי השימוש במכשיר, הפעלת המכשיר, והנהלים שלאחר השימוש.

מהו סילקן FaceFX?

סילקן FaceFX הינו מכשיר דיודה פולטת אור (LED) ידני לטיפולי פנים. סילקן FaceFX מטפל בקמטים סביב איזור העיניים, הפחתה של גודל הנקבוביות, ושיפור זמני במראה העור. האור הנפלט מן הסילקן FaceFX מעורר את רקמות העור העמוקות ומחזיר לפנים את המראה הצעיר. איזורים אופייניים לטיפול הם הצוואר, הלחיים, המצח וסביב העיניים.

תיאור מכשיר סילקן FaceFX

מכשיר ה-FaceFX מורכב מיחידת בסיס, ידית טיפול ומתאם. ידית הטיפול היא יחידה לשימוש ידני, המורכבת ממשטח טיפול בקצה ידית הטיפול, מתג הכיבוי וההפעלה ופאנל חיווי. יחידת הבסיס משמשת לטעינת הבטריות של ידית הטיפול.

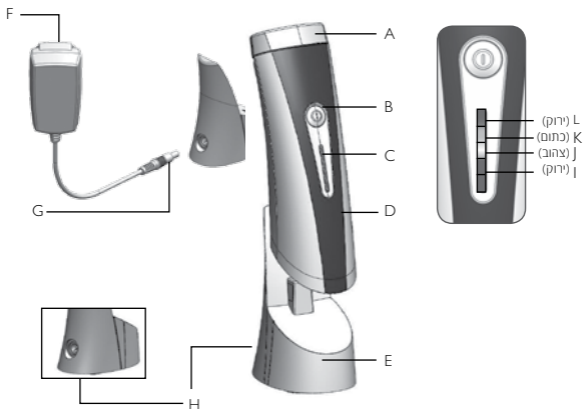

A	משטח הטיפול	G	תקע
B	מתג הכיבוי והפעלה	H	שקע יחידת הבסיס
C	פאנל חיווי	I (ירוק)	דולק - מוכן לשימוש. מהבהב - בטריה חלשה
D	ידיית הטיפול	J (כתום)	תקלה - טענו את היחידה ונסו שוב
E	יחידת הבסיס	K (צהוב)	בטריה נטענת
F	מתאם	L (ירוק)	בטריה טעונה במלואה

תכולת החבילה

כשתפתחו את אריזת הסילקן FaceFX, תמצאו את הפריטים הבאים:

- יחידת הבסיס וידיית הטיפול של ה FaceFX
- מתאם
- הוראות שימוש

בכדי להגן על עורך, חיישן טמפרטורה מותקן בקצה ידית הטיפול של הסילקן FaceFX. חיישן זה מבטיח כי טמפרטורת המשטח הנוגע בעור לא תעלה על $106^{\circ}\text{F} / 41^{\circ}\text{C}$.

מתי יש להמנע משימוש בסילקן FaceFX?

- מצבים מסוימים עלולים למנוע באופן זמני את השימוש בסילקן FaceFX. אין להשתמש בסילקן FaceFX אם חל לגביך אחד מהמצבים הבאים:
- אם יש לך עור כהה, או כתמים כהים, כמו נמשים גדולים, כתמי לידה, שומות, או יבלות באיזור המיועד לטיפול.
 - אם יש לך אקזמה, פסוריאזיס, פגיעה, פצעים פתוחים, או דלקות פעילות, כמו הרפס, באיזור המיועד לטיפול. יש להמתין עד להחלמה של האיזור לפני השימוש בסילקן FaceFX.
 - אם יש לך מחלות עור הנובעות מסכרת או ממחלות סיסטמיות או מטאבוליות אחרות.
 - אם כיום, או לאחרונה, טופלת בחומצות אלפא-הידרוקסי (AHA), חומצות בטא-הידרוקסי (AHB), רטין-^A, רטינואידים מקומיים, או חומצה אזלאית.
 - אם טופלת באקוטאן[®] (איזוטרטינוין) ב-6 החודשים האחרונים.
 - אם נטלת סטרואידים ב-3 החודשים האחרונים.
 - אם יש לך היסטוריה של התפרצויות הרפס באיזור המטופל, אלא אם כן התייעצת עם הרופא שלך וקיבלת טיפול מונע לפני השימוש בסילקן FaceFX.

הפחתת הסיכון לפגיעה

- יש לשמור על סילקן FaceFX הרחק מהישג ידם של ילדים.
- יש לשמור על סילקן FaceFX הרחק מהישג ידם של אנשים בעלי מגבלות פיזיות, חושיות, או נפשיות.



- יש להרחיק את הסילקן FaceFX ממים!
- אין לאחסן את הסילקן FaceFX בסביבה לחה (כמו בסמוך למקלחת או אמבטיה).
- יש לשמור על המכשיר והמתאם יבשים!
- אין להשתמש בסילקן FaceFX אם נגרם נזק למתאם או לידית הטיפול.
- אם נגרם נזק לידית הטיפול, יש לוודא כי היא מוחלפת בחלק מקורי מתוצרת הום-סקינוביישנס!
- ידית הטיפול מכילה טרנספורמטור יעודי. אין להחליף את תקע ידית הטיפול בשום תקע אחר.
- אם אינכם בטוחים אם השימוש בסילקן FaceFX הינו בטוח עבורכם, אנא היוועצו ברופא המשפחה או רופא העור שלכם.

תופעות לוואי אפשריות בשימוש ב FaceFX

- כאשר השימוש נעשה בהתאם להוראות, תופעות הלוואי הקשורות בשימוש בסילקן FaceFX הן נדירות.
- עם זאת, בכל הליך קוסמטי, בכלל זה אלו המיועדים לשימוש ביתי, מעורבת מידה מסוימת של סיכון. לפיכך, חשוב להבין ולקבל את הסיכונים והסיבוכים העלולים להתרחש בעבודה עם מערכות מבוססות אנרגיה המיועדות לשימוש ביתי.
- הטיפולים באמצעות סילקן FaceFX הינם נטולי כאב בדרך כלל. מרבית המשתמשים חשים את החום הקל המופק מן המכשיר במהלך השימוש, ללא כל אי-נוחות נוספת.
- אי-נוחות קלה של העור

- עורך עלול להיות מגורה מעט לאחר השימוש בסילקן FaceFX. זוהי תופעה רגילה וחולפת. אם הגירוי אינו נעלם לאחר שלושה ימים, יש להיוועץ ברופא המשפחה או ברופא העור.

- אדמומיות בעור
- עורך עלול להיות אדמומי מעט לאחר השימוש ב FaceFX. אדמומיות זו אמורה לחלוף בתוך מספר שעות לאחר הטיפול.

הגנה על הסילקן FaceFX שלך

- יש לאחסן את המכשיר במקום נקי וללא אבק.
- אין לכסות את חריצי האוורור במהלך השימוש.
- לעולם אין לטלטל או להפיל את מכשיר הסילקן FaceFX, או לחשוף אותו למכות חזקות.
- סילקן FaceFX רגיש לטמפרטורת הסביבה בזמן השימוש. אין לחשוף את ה FaceFX לטמפרטורות חיצוניות נמוכות מ- 59°F / 15°C או גבוהות מ- 95°F / 35°C במהלך השימוש.
- סילקן FaceFX אינו עמיד בפני שינויי טמפרטורה קיצוניים. כאשר מעבירים את המכשיר מסביבה קרה (מתחת ל- 50°F / 10°C) לסביבה חמה, יש להמנע משימוש במשך כ-3 שעות.
- אין לחשוף את הסילקן FaceFX לאור שמש ישיר או לקרינת VU לאורך זמן ממושך.
- סילקן FaceFX מיועד לשימוש ביתי מזדמן (בניגוד לשימוש מקצועי או מסחרי בתדירות גבוהה). יש להמנע משימוש תדיר מסוג זה.
- יש להמנע מכיסוי הסילקן FaceFX והמתאם שלו בזמן טעינה.

טיפול בעור בשיטת ה FaceFX

היתרונות של סילקן FaceFX

התוצאות של שימוש בסילקן FaceFX בהתאם להוראות הן הפחתה בקמטי ההבעה, הקטנת גודל הנקבוביות ושיפור של מראה הפנים. ניתן לצפות לתוצאות מיטביות כ-3 עד 7 שבועות לאחר סיום מהלך הטיפול המומלץ.

איזורי טיפול פנים של סילקן FaceFX

איזורים אופייניים לטיפול הם הצוואר, הלחיים, המצח וסביב העיניים.



צעדים ראשונים עם סילקן FaceFX

הכנת מכשיר הסילקן FaceFX

- יש להוציא את יחידת הבסיס, ידית הטיפול, המתאם, ושאר חלקי הסילקן FaceFX מן האריזה
- לפני השימוש הראשון בסילקן FaceFX, יש לטעון את הבטריה לגמרי. טעינה זו אורכת עד 6 שעות.

טעינת הבטריה בסילקן FaceFX

- יש להכניס את ידית הטיפול של סילקן FaceFX למקומה ביחידת הבסיס.
- יש לחבר את תקע המתאם אל השקע שביחידת הבסיס.

יש לחבר את המתאם אל מקור חשמל. בשלב זה תדלק נורית החיווי "בטריה נטענת" (K), סימן לכך שהסילקן FaceFX נמצא בתהליך טעינה.

זהירות!

אין לכסות את סילקן FaceFX ואת המתאם שלו בעת טעינה!

שימו לב!

לא ניתן להשתמש בסילקן FaceFX בעת טעינה.



כאשר תכבה נורית החיווי "בטריה נטענת" (K), ותדלק נורית החיווי "בטריה טעונה במלואה" (L), מכשיר הסילקן FaceFX שלך טעון ומוכן לתחילת השימוש.
(יש לטעון מחדש את הבטריה כאשר נורית החיווי "בטריה נטענת" (K) נדלקת שוב.)

תכנון השימוש בסילקן FaceFX להשגת תוצאות מיטביות

היעילות בהשגת התוצאות משתנה מאדם לאדם, ובהתאם לתדירות השימוש. משתמשים מסוימים יוכלו לראות את התוצאות מהר יותר ממשתמשים אחרים.

טיפול יחיד ב FaceFX אורך בדרך כלל בין 15 ל-20 דקות, בהן יש להחליק לאט ובעדינות את ידית הטיפול של ה FaceFX על פני איזור הטיפול הרצוי. בזמן הליך זה, תורגש חדירה של חום עדין אל תוך העור. מהלך הטיפול הראשוני בסילקן FaceFX: במשך החודש הראשון (4 שבועות), יש לבצע את הטיפול 3 פעמים בשבוע, במשך 15 עד 20 דקות בכל פעם.

מתכונת טיפולי תחזוקה ושימור בסילקן FaceFX:
יש להשתמש בסילקן FaceFX פעם בשבוע, למשך 15 עד 20 דקות.

טיפול ראשון באמצעות FaceFX

- על העור להיות נקי, יבש, וללא כל אבקה, ג'ל, או קרם.
- יש להרים את ידית הטיפול של סילקן FaceFX ממקומה ביחידת הבסיס.
- יש ללחוץ על מתג הכיבוי וההפעלה. נורית החיווי "מוכן/טיפול" (I) הירוקה תחל להבהב, ולאחר זמן קצר תדלוק ברציפות. מכשיר ה-FaceFX שלך מוכן לשימוש.
- יש להניח את משטח הטיפול על עורך. נורת ה-LED (LED) תופעל באופן אוטומטי.
- יש להפעיל לחץ קל, תוך הנעה של ידית הטיפול של FaceFX בתנועות סיבוביות. טמפרטורת משטח הטיפול תעלה מעט.
- יש לבצע את הטיפול במשך 5 עד 7 דקות לכל איזור.
- מומלץ למרוח כמות קטנה של קרם לחות על איזורי העור שטופלו לאחר כל טיפול ולעסות את הקרם בעדינות בתנועות סיבוביות.



למה לצפות כאשר משתמשים בסילקן FaceFX?

בזמן ביצוע הטיפולים בסילקן FaceFX, טבעי כי תורגשנה התופעות הבאות:

- תחושת חום - במהלך הטיפול בסילקן FaceFX תורגש חמימות קלה. זוהי תגובה נורמלית, הנעלמת בדרך כלל בתוך כשעה מסיום הטיפול.
- אדמומיות קלה - לאחר כל טיפול בסילקן FaceFX יתכן כי תתפתח אדמומיות מסוימת של העור (אדמת קלה) באיזור המטופל. זוהי תגובה נורמלית החולפת בתוך שעה עד שעתיים.
- ניתן לצפות לתוצאות מיטביות כ- 3 עד 7 שבועות לאחר סיום מהלך הטיפול המומלץ.

לאחר הטיפול בסילקן FaceFX

- לאחר שסיימת את הטיפול באמצעות FaceFX, יש לכבות את המכשיר על ידי לחיצה על מתג הכיבוי וההפעלה.
- לאחר כל טיפול, מומלץ לנקות את מכשיר ה-FaceFX, במיוחד את קצה ידית ההפעלה (כמפורט בסעיף: "ניקוי מכשיר הסילקן FaceFX")
- יש להניח את ידית הטיפול במקומה שביחידת הבסיס בכדי לטעון מחדש את הבטריה (כמפורט בסעיף: "טעינת הבטריה בסילקן FaceFX").

תחזוקה של מכשיר הסילקן FaceFX

ניקוי מכשיר הסילקן FaceFX

לאחר כל טיפול, מומלץ לנקות את מכשיר ה-FaceFX: יש לכבות את הסילקן FaceFX באמצעות לחיצה על מתג הכיבוי וההפעלה.

- יש לנתק את הסילקן FaceFX ממקור החשמל.
- יש להניח למשטח הטיפול להתקרר.
- יש להשתמש במטלית יבשה ונקייה ובחומר ניקוי המיועד לצידוד
- אלקטרוני, ולנגב את המכשיר בעדינות, במיוחד באיזור של משטח הטיפול שלו.
- לעולם אין להשרות במים את הסילקן FaceFX או כל חלק שלו!
- לעולם אין לנקות את הסילקן FaceFX או כל חלק שלו תחת מים
- זורמים או באמצעות מדיח כלים.



אחסנה

- יש לאחסן את המכשיר הנקי במקום יבש, בטמפרטורה שבין 10°C- ל-14°C / 50°F- ל-57°F

שמירה על איכות הסביבה

לאחר שמכשיר הסילקן FaceFX סיים את חייו, אין להשליך אותו יחד עם הפסולת הביתית הרגילה. יש להשליך את המכשיר לאחד ממתקני האיסוף והמחזור המורשים.

יש להוציא מן המכשיר את הבטריות ולהשליך אותן למתקן איסוף המיועד לבטריות. צרו קשר עם רשות המחזור המקומית בכדי לקבל את מיקומי המתקנים והוראות למחזור נכון.



הוצאת הבטריות הנטענות

יש להוציא את הבטריות הנטענות רק אם הן ריקות לגמרי ולא ניתן לטעון אותן מחדש.

הבריגו החוצה את הבורג בחלקה התחתון של ידית הטיפול.



הרימו והסירו את הפאנל העליון של ידית הטיפול.



דחפו את שלושת החיבורים ומשכו החוצה את הכרטיס האלקטרוני.



חתכו את החוטים המחברים את מארז הבטריות הנסענות אל ידית הטיפול.



חתכו את החוטים המחברים את הכרטיס האלקטרוני אל הפאנל התחתון של ידית הטיפול.




פתרון בעיות

פרק זה סוקר את הבעיות השכיחות ביותר היכולות להופיע. אם לא הצלחת למצוא את הפתרון לבעיה בה נתקלת בפירוט הבא, יש ליצור קשר עם מרכז שירות הלקוחות של סילקן באיזור מגוריך לתמיכה נוספת.

משטח הטיפול	משטח הטיפול	משטח הטיפול
יש לטעון את ידית הטיפול	הבטריות הנסענות ריקות	סילקן FaceFX אינו פועל
יש ליצור קשר עם מרכז שירות הלקוחות של סילקן באיזור מגוריך	ידית הטיפול שבורה	
יש לטעון את ידית הטיפול	הבטריות הנסענות ריקות	סילקן FaceFX כבה באופן פתאומי
אין צורך לעשות דבר	זהה תופעה נורמלית	טמפרטורת המכשיר עולה במהלך הטעינה

<p>יש להכניס את התקע אל שקע יחידת הבסיס</p> <p>יש לחבר מכשיר חשמלי אחר בכדי לוודא שהשקע תקין</p> <p>אם ידית הטיפול עדיין אינה נטענת, יש ליצור קשר עם מרכז שירות הלקוחות של סילקן באיזור מגוריך</p>	<p>המתאם אינו מחובר למקור חשמלי</p>	<p>נורית החיווי "בטריה נטענת" (כתום - K) אינה נדלקת כאשר מחברים את התקע אל שקע יחידת הבסיס</p>
<p>יש לוודא כי ידית הטיפול מחוברת היטב למקור המתח ו/או כי התקע מחובר היטב לשקע יחידת הבסיס</p>	<p>המתאם אינו מחובר כראוי למקור החשמל ו/או התקע אינו מחובר כראוי לשקע יחידת הבסיס</p>	
<p>יש ליצור קשר עם מרכז שירות הלקוחות של סילקן באיזור מגוריך</p>	<p>ידית הטיפול שבורה</p>	
<p>אין צורך לעשות דבר</p>	<p>זוהי תופעה נורמלית</p>	<p>טמפרטורת ידית הטיפול עולה במהלך הטעינה</p>
<p>יש ללחוץ פעמיים על מתג הכיבוי וההפעלה בכדי לכבות ולהדליק בחזרה את ידית הטיפול. אם נורית החיווי "תקלה" (צהוב - J) נדלקת שוב, יש ליצור קשר עם מרכז שירות הלקוחות של סילקן באיזור מגוריך</p>	<p>ישנה תקלה בידיית הטיפול</p>	<p>נורית החיווי "מוכן לשימוש" (ירוק - I) מהבהבת</p>
<p>הבטריות סלאות</p>	<p>הבטריות ריקות</p>	<p>נורית החיווי "מוכן/ טיפול" (ירוק - I) אינה נדלקת כאשר לוחצים על מתג הכיבוי וההפעלה</p>
<p>יש ללחוץ פעמיים על מתג הכיבוי וההפעלה בכדי לכבות ולהדליק בחזרה את ידית הטיפול. אם נורית החיווי "מוכן/טיפול" (ירוק - I) עדיין אינה נדלקת, יש ליצור קשר עם מרכז שירות הלקוחות של סילקן באיזור מגוריך</p>	<p>נורית החיווי (ירוק - I) נדלקת כאשר ידית הטיפול מונחת במטען שביחידת הבסיס יש לטעון את ידית הטיפול</p>	
<p>יש לטעון את המתאם</p>	<p>הבטריות הנטענות ריקות</p>	<p>נורית החיווי "תקלה" (צהוב - J) מהבהבת</p>
<p>יש לנתק את המתאם ממקור החשמל, ללחוץ פעמיים על מתג הכיבוי וההדלקה בכדי להדליק ולכבות שוב את ידית הטיפול.</p> <p>יש לחבר את המתאם אל התקע שבקיר. אם הבעיה נמשכת, יש ליצור קשר עם מרכז שירות הלקוחות של סילקן באיזור מגוריך</p>	<p>תקלה במתאם</p>	<p>נורית החיווי "בטריה נטענת" (כתום) ונורית החיווי "בטריה טעונה במלואה" (ירוק) נדלקות לסירוגין</p>
<p>יש ללחוץ פעמיים על מתג הכיבוי וההפעלה בכדי לכבות ולהדליק בחזרה את ידית הטיפול. אם הבעיה נמשכת, יש ליצור קשר עם מרכז שירות הלקוחות של סילקן באיזור מגוריך</p>	<p>תקלה בידיית הטיפול</p>	

למידע נוסף על מוצרי סילקן™ או לרשימת אתרי האינטרנט במדינות השונות אנא בקרו באתר www.sensepil.co.il אם המכשיר שלך נשבר, נפגם, או זקוק לתיקון, או לכל תמיכת לקוחות אחרת, יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות של סילקן™ בטלפון 1-700-700-309 או לשלוח מייל לכתובת: info@silkn.com

100V - 240V	מתח נומינלי
דגם: UE08WCP-105040SPA	
50Hz – 60Hz	תדירות נומינלית (מתאם)
mA 400	זרם נומינלי (מתאם)
סוג BF 	חלק פעיל במגע ישיר (applied part)
IP20 (EN60529)	דירוג הגנה
טמפרטורה: 10°C עד 60°C / 41°F עד 140°F	מצב אחסון
לחות יחסית: 5% עד 95%	
טמפרטורה: 15°C עד 35°C / 59°F עד 95°F	מצב הפעלה
לחות יחסית: 10% עד 80%	
לחץ אטמוספירי: 700 עד 1060 aPh	
דיודה פולטת אור (LED)	מקור אור
אורכי גל בשיא התפוקה: 645nm	
הספק העצמה: 25mW ± 35%	
2 x 3.7V, 750±50mAh	בטריית ליתום-יון
6 שעות	זמן טעינה מקסימלי


 Tavor building
 Shaar Yokneam, P.O.Box 533
 20692 Yokneam, Israel

MODEL : FaceFX
PART NO. : AS1018321
MANUFACTURED : 4910









 For use only with power adaptor specified in user's manual
 À utiliser seulement avec l'adaptateur de puissance précisé dans le Guide de l'utilisateur

000100001



 10.5V  400mA


Made in ISRAEL

מידת הגנה בפני התחשמלות: חלקים פעילים במגע ישיר - סוג BF	
WEEE - פסולת אלקטרונית וציוד אלקטרוני	
סימן CSA	
סימן CE	

מידת עמידות בפני חדירת מים: רגילה

מכשיר זה אינו מתאים לשימוש בנוכחות תערובת דליקה של חומרים מרדימים ואוויר או עם חמצן או חמצן דו חנקתי.

הסימול  שעל התווית המוצמדת למכשיר זה, משמעו: "זהירות, יש לעיין במסמכים המצורפים".



HomeSkinovations™

בניין תבור, שער יקנעם, ת.ד. 335,
יקנעם 29602, ישראל

טלפון: 04-9097770 פקס: 04-9097471
info@silkn.com, contact@silkn.com

www.sensepil.co.il

PB102496B

