



SensEpil™



הוראות שימוש

זכויות יוצרים © 2008 הם סקינביישנס בע"מ. כל הזכויות שמורות.
תאריך הדפסה: אפריל 2009

הם סקינביישנס בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לשינויים במוצריה או במפרטים לשיפור הביצועים, האמינות או התפועל. המידע הניתן ע"י הום סקינביישנס בע"מ נחשב מדויק ואמין בזמן פרסומם. עם זאת, הום סקינביישנס בע"מ אינה נושאת באחריות לשימוש בו. אין רשות להשתמש במשתמע ממנו או אחרת תחת שום פטנט או זכויות לפטנט של הום סקינביישנס בע"מ. שום חלק מספקן זה לא יועתק או ישודר בשום דרך, אלקטרונית או מכנית, לשום מטרה, ללא אישור בכתב של הום סקינביישנס בע"מ. הנתונים עשויים להשתנות ללא הודעה.

הום סקינביישנס בע"מ היא בעלת פטנטים ובקשות לרישום פטנטים, סימנים מסחריים, זכויות יוצרים או זכויות לקניין רוחני הנוגעות לספקן זה. אספקת המספקן אינה מקנה לחמוקין בו כל זכות בפטנטים, הסימנים המסחריים, זכויות היצרים וזכויות לקניין רוחני אלה אלא אם ניתנו בהסכם כתוב של הום סקינביישנס בע"מ. המפרט נתון לשינויים ללא הודעה.

הום סקינביישנס בע"מ בנין תבור, שער יוקנעם ת.ד. 533, יוקנעם 20692, ישראל. info@silkn.com, www.silkn.com

תוכן העניינים

4	1. לפני שמתחילים.....
4	1.1 תיאור מכשיר Silk'n SensEpi™.....
4	1.2 תוכן המארז.....
5	1.3 ראש מתכלה.....
5	2. יעדי השימוש ב-Silk'n SensEpi™.....
5	2.1 יעדי השימוש ב-Silk'n SensEpi™.....
5	3. בטיחות בשימוש ב-Silk'n SensEpi™.....
6	4. אזהרות בטיחות.....
7	5. מתי יש להימנע משימוש ב-Silk'n SensEpi™.....
8	6. אמצעי הגנה - כיצד משתמשים ב-Silk'n SensEpi™ בצורה בטוחה?.....
9	7. הפחתת הסיכון לפציעה.....
10	8. תופעות לוואי אפשריות לשימוש ב-Silk'n SensEpi™.....
11	9. הדרך של Silk'n SensEpi™ להסרת שיער לטווח ארוך.....
11	9.1 כיצד אור מסיר שיער?.....
12	9.2 כיצד משפיע מחזור הצמיחה של השיער על הסרת השיער באור?.....
12	9.3 כדאי לתכנן את הסרת השיער באמצעות Silk'n SensEpi™ להשגת תוצאות הטובות ביותר.....
13	10. הצעדים הראשונים עם Silk'n SensEpi™.....
13	10.1 הרכבת Silk'n SensEpi™.....
13	10.2 הטיפול הראשון עם Silk'n SensEpi™.....
15	10.3 למה לצפות בזמן הטיפול ב-Silk'n SensEpi™?.....
16	10.4 לאחר הטיפול ב-Silk'n SensEpi™.....
16	11. תחזוקת Silk'n SensEpi™.....
16	11.1 ניקוי Silk'n SensEpi™.....
16	11.2 החלפת הראש המתכלה.....
17	12. פתרון בעיות.....
17	12.1 "מכשיר Silk'n SensEpi™ שלי אינו פועל".....
17	12.2 "אין הבדק אור כאשר לחצים על ההדק".....
18	13. שירות לקוחות.....
18	14. שאלות נפוצות.....
21	15. מפרט.....
22	16. מפרט טכני.....
23	הצגרת התמימות של האיחוד האירופי.....

Silk'n SensEpi™ הוא מכשיר רב-עוצמה, ולכן יש להשתמש בו תוך תשומת לב מיוחדת לבטיחות.

יש להרחיק את Silk'n SensEpi™ מאיזור העיניים!



אין להשתמש ב-Silk'n SensEpi™ על עור שזוף או לאחר חשיפה לשמש! שימוש כזה עלול לגרום כוויות חמורות או פציעה בעור.



אינם בטיחותי!

אין להשתמש ב-Silk'n SensEpi™ על עור גוון בטבעי כהה!



יש לקרוא את כל האזהרות ואמצעי ההגנה לפני השימוש, ולמלא אותן בקפדנות בעת השימוש ב-Silk'n SensEpi™!



שימו לב: Silk'n SensEpi™ עלול שלא להיות יעיל לשיער לבן או בהיר מטבעו.

יש לתכנן את הסרת השיער באמצעות Silk'n SensEpi™ על מנת להשיג את התוצאות הטובות ביותר.

התכנית האופיינית של Silk'n SensEpi™ להסרת שיער במהלך מחזור צמיחה מלא של השיער:

- 3-4 טיפולים הראשונים ב-Silk'n SensEpi™ יהיו במרווחים של שבועיים בערך זה מזה.
- טיפולים 5-7 ב-Silk'n SensEpi™ יהיו במרווחים של 4 שבועות בערך זה מזה.
- לאחר מכן משתמשים בדרך כלל ב-Silk'n SensEpi™ שוב מפעם לפעם, אם וכאשר יש צורך, עד להשגת תוצאות לטווח ארוך. טיפול אופייני ב-Silk'n SensEpi™ לאחר השגת התוצאות לטווח ארוך: כתוצאה משינויים הורמונאליים או פיסיים עלולים דקיקי שיער רדומים להפוך פעילים. ייתכן צורך בטיפולים נוספים ב-Silk'n SensEpi מפעם לפעם.

לפני השימוש הראשון ב-Silk'n SensEpi™, יש לקרוא את הוראות השימוש בסלואן. יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לחלקים הנוגעים בתהליך השימוש במכשיר, בתפעולו ובתחזוקתו לאחר השימוש. אנו מסליצים לרענן את הזיכרון ולקרוא את הוראות לפני כל שימוש.


Silk'n SensEpi™ הינו מכשיר חשמלי רב עוצמה, ולכן יש להשתמש בו תוך תשומת לב מיוחדת לבטיחות. יש לקרוא את כל האזהרות ואמצעי ההגנה לפני השימוש, ולמלא אחריהן בקפדנות בזמן השימוש ב-Silk'n SensEpi™.



1. לפני שמתחילים

1.1 תיאור מכשיר Silk'n SensEpi™

Silk'n SensEpi™ מורכב מיחידת בסיס עם לוח בקרה, ידית טיפול וראש מתכלה. על ידית הטיפול של Silk'n SensEpi™ נמצא ההדק. הראש המתכלה נמצא בקצה העליון של הידית.

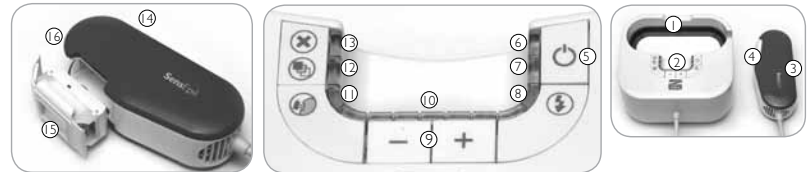

- | | | | |
|--------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| ① יחידת בסיס | ⑤ מתג הפעלה/המתן | ⑩ כפתורי כוונון העוצמה | ⑬ נורית אזהרה על תקלה |
| ② לוח בקרה | ⑥ נורית חייוי מסתין | ⑪ נוריות חייוי העוצמה | ⑭ הדק |
| ③ ידית טיפול | ⑦ נורית חייוי פועל | ⑫ נורית חייוי להחלפת ראש התאורה | ⑮ ראש מתכלה |
| ④ ראש מתכלה | ⑧ נורית חייוי מוכן להבדק | ⑬ נורית אזהרה לגיוון העור | ⑯ הקצה העליון של ידית הטיפול |

1.2 תוכן המארז

עם פתיחת המארז של Silk'n SensEpi™ יימצאו בו החלקים הבאים:

- יחידת בסיס וידית טיפול של Silk'n SensEpi™
- חוט חיבור לשקע חשמל ביתי
- סדרוך זה למשתמש
- תקליטור די.וי.די להדרכה
- תעודת אחריות

1.3 ראש מתכלה

הראש המתכלה של Silk'n SensEpi™ יכול לשגר 750 הבזקי-אור (ללא קשר לרמת העוצמה של הבזקים אלה). לגוף במסגדים סמוצעים 750 הבזקים יכולים לכסות, לדוגמה: טיפולים בודדים ב-2 רגליים, 2 זרועות, 2 בתי-שחי וקו הביקיני. או שני טיפולים של 2 רגליים ו-2 בתי-שחי. או עשרה טיפולים של שני בתי-שחי וקו הביקיני. בהתאם לאזורים שייבחרו לטיפול, יידרשו לך בדרך כלל בין אחד לשבעה ראשים מתכלים בשנה הראשונה לשימוש ב-Silk'n SensEpi™.

2. יעדי השימוש ב-Silk'n SensEpi™

2.1 יעדי השימוש ב-Silk'n SensEpi™

Silk'n SensEpi™ נועד להסרת שיער בלתי רצוי.

ניתן להשתמש ב-Silk'n SensEpi™ להסרת שיער גוף בלתי רצוי. האזורים הטובים ביותר לשימוש ב-Silk'n SensEpi™ כוללים את בתי-שחי, קו הביקיני, זרועות ורגליים.

3. בטיחות בשימוש ב-Silk'n SensEpi™

ב-Silk'n SensEpi™ הבטיחות קודמת לכל

- טכנולוגיית הבזקי-אור-ביתיים (HPL™) של Silk'n SensEpi™ - בטיחות מרבית בעצמה נמוכה. טכנולוגיית HPL™ מסוגלת להשיג תוצאות ארוכות-טווח בהסרת שיער תוך שימוש בעצמת אנרגיה נמוכה בהרבה מסכשירים אחרים מבוססי אור להסרת שיער. הרמה הנמוכה של עוצמת האנרגיה מפחיתה את הסיכון לפגיעות או לסיבוכים, ותורמת לבטיחותך הכללי.
- **Silk'n SensEpi™ מגן על עורך**
הסרת שיער באמצעות אור אינה מתאימה לעור כהה מסבכו או לעור שזוף. Silk'n SensEpi™ כולל חיישן צבע עור מובנה, המיועד למדוד את גוון פני העור ומאפשר טיפול רק בעור בגוון המתאים. מנגנון בטיחות זה לא יאפשר לך לטפל באזורי גוף בהם גוון העור כהה מדי או שזוף מדי.
- **העדשה האופטית** במסגדים של 3x ס"מ אשר דרכה עוברים הבזקי האור משוקעת בתוך הראש המתכלה בקצה ידית הטיפול. כך יכול Silk'n SensEpi™ סניעת מגע ישיר בין העדשה לבין העור, מגינה על עורך מפני חום העדשה.
- **Silk'n SensEpi™ מגן על עיניך**
לדית הטיפול של Silk'n SensEpi™ יש רכיב ייחודי להגנה על העיניים. הוא מוצב כך שהבזק האור אינו יכול להיות משוגר כאשר ידית הטיפול אינה מכוונת למשטח. מתג הבטיחות מופעל רק כאשר קצה ידית הטיפול בא במגע עם העור.

4. אזהרות בטיחות

מידע בטיחותי חשוב - יש לקרוא לפני השימוש!

Silk'n SensEpil™ אינו מיועד לכל אדם. יש לקרוא ולשקול את המידע המופיע בפסקה הבאה בטרם השימוש. למידע נוסף ולייעוץ אישי אפשר לבקר באתר www.sensepil.co.il

■ אם אינך בטוחה לגבי מידת ההתאמה של Silk'n SensEpil™ עבורך, יש לשאול את הרופא או רופא העור שלך!
■ אין להשתמש ב Silk'n SensEpil™ על עור כהה מטבעו!

Silk'n SensEpil™ מסיר שיער בלתי רצוי באמצעות גישה בררנית אל הפיגמנטים בשיער. כמויות כלשהן של פיגמנט נמצאות גם ברקמות העור הסמוכות. כמות הפיגמנט בעורו של אדם הניכרת על פי צבע עורו, קובעת את דרגת הסיכון שהוא חשוף אליה בטיפול הסרת שיער באמצעות אור.

טיפול בעור כהה ב Silk'n SensEpil™ עלול לגרום תוצאות שליליות כגון כוויות, שלפוחיות ושינויים בצבע העור (היפר או היפו-פיגמנטציה). חיישן צבע עור ייחודי מוטמע ב Silk'n SensEpil™ כדי למדוד את גוון העור לפני תחילת כל טיפול ולעתים בזמן הטיפול. חיישן צבע העור מבטיח כי הבזקי האור ישוגרו רק על אזורי עור מתאימים.

■ אין לנסות להשתמש ב Silk'n SensEpil™ על עור כהה מטבעו!
המכשיר לא יפעל!
טבלת צבעי עור נמצאת בצדה הפנימי של הכריכה.



■ אין להשתמש ב Silk'n SensEpil™ על עור שזוף או לאחר חשיפה לשמש!

עור שזוף, במיוחד לאחר חשיפה לשמש, מכיל כמויות גדולות של הפיגמנט מלנין. כך בכל סוגי העור והגונים, גם כאלה שאינם נראים כמשתזפים במהירות. נכחות כמויות גדולות של מלנין חושפת את העור לסיכון גבוה יותר בשימוש בכל שיטה של הסרת שיער באמצעות אור.

שימוש ב Silk'n SensEpil™ על עור שנחשף לאחרונה לשמש עלול לגרום תוצאות שליליות כגון כוויות, שלפוחיות ושינויים בצבע העור (היפר או היפו-פיגמנטציה).

■ אין לנסות שימוש ב Silk'n SensEpil™ על עור שזוף או שנחשף לאחרונה לשמש! שימוש כזה עלול לגרום כוויות חמורות ופיגועי בעור. יש להימנע מחשיפה לשמש 4 שבועות לפני טיפול ב Silk'n SensEpil™!



■ יש להרחיק את Silk'n SensEpil™ מאזור העיניים

ניתן להשתמש ב Silk'n SensEpil™ להסרת שיער מהפנים, אך במקרה כזה יש להרחיק מאזור העיניים. לעולם אל תשתמש ב Silk'n SensEpil™ ליד או סביב העיניים.

יש להרחיק את Silk'n SensEpil™ מאזור העיניים!



■ שימו לב! Silk'n SensEpil™ אינו יעיל בהסרת שיער בהיר

Silk'n SensEpil™ אינו יעיל בהסרת שיער גוף שהוא מטבעו לבן, אפור, בלונדיני או אדמוני. אם אחד מאלה הוא צבע שיער הגוף שלך, Silk'n SensEpil™ לא יהיה יעיל עבורך.

5. מתי יש להימנע משימוש ב Silk'n SensEpil™

תנאים מסוימים עשויים למנוע את הטיפול ב Silk'n SensEpil™ באופן זמני. אין להשתמש ב Silk'n SensEpil™ אם אחד הסעיפים הבאים נוגע אליך:

- במהלך ההיריון או תוך כדי תקופת ההנקה.
- במידה והאזור המיועד להסרת שיער נחשף לאור שמש חזק והינו שזוף במיוחד או לחילופין נעשה שימוש במכשיר שזוף במהלך 28 הימים האחרונים.
- אם קיים באזור המיועד להסרת שיער קעקוע או איפור קבוע.
- אם באזור המיועד להסרת שיער ישנם כתמים חומים כהים או שחורים, כגון נמשים גדולים, כתמי-לידה, שומות או יבלות.
- אם האזור המיועד להסרת שיער נגוע באקזמה, ספחת (פסוריאזיס), או בעל נגעים, פצעים פתוחים או זיהומים פעילים, כגון הרפס - במקרים אלה יש להמתין עד להחלמת האזור הנגוע לפני השימוש ב Silk'n SensEpil™.
- אם באזור המיועד להסרת שיער ישנה היווצרות צלקת קלאודית, רגישות ידועה לאור או נטילת תרופה שמגבירה את רגישותו של העור לאור, כולל נוגדי דלקת לא-סטרואידים (כגון אספירין, איבופרופן, אצטמינופן), סטרציקלינים, פנותיאזינים, תיאזידים, קשתנים, תרופות מסשפחת הסולפונילאוראה, סולפונמידים, דקרבזין, פלואורואורציל, וינבלסטין, גריזופולבין, חומצות אלפא-הידרוקסיות (AHAs), חומצות ביתא-הידרוקסיות (BHAs), רטין A (Retin-A), אקוטן (Accutane) ו/או רטינואידים מקומיים.
- במצבים בהם העור באזור המיועד להסרת שיער אינו בריא כתוצאה מסחלת סוכרת, למשל, או מחלות מטבוליות או סיסטמיות אחרות;
- במהלך טיפול בחומצות אלפא-הידרוקסיות (AHAs), חומצות ביתא-הידרוקסיות (BHAs), רטין A (Retin-A), רטינואידים מקומיים או חומצה אזלאית, או זמן קצר לאחר טיפול כזה.
- אם טופלת במאצעות אקוטן (Accutane) (איזוטרטינואין) במהלך 6 החודשים האחרונים.
- אם נטלת סטרואידים באופן סדיר במהלך 3 החודשים האחרונים.
- אם באזור המיועד להסרת שיער קיים רקע של התפרצויות הרפס, אלא אם נועצת עם רופא וקיבלת טיפול מונע לפני השימוש ב Silk'n SensEpil™

- במקרה של מחלת כפיון (אפילפסיה).
- אם קיים שְׁתָּל פּעיל, כגון קוצב-לב, מכשיר למניעת אי-שליטה במתן שתן, משאבת אינסולין וכו'.
- אם קיימת מחלה הקשורה לרגישות לאור, כגון פורפיריה, PLE (polymorphic light eruption - פריחה לאחר היחשפות ראשונה לשמש באותה שנה), solar urticaria, זאבת (לופוס) וכו'.
- אם קיים רקע של סרטן עור או אזורים בעור עם פוטנציאל למסאיר.
- אם עברת טיפול בהקרנה או טיפול כימותרפי במהלך 3 החודשים האחרונים;
- בכל מצב אחר שבעיניך, לדעת הרופא המטפל, הטיפול להסרת שיער אינו בטיחותי בעבורך.
- אם יש לך ספק כלשהו לגבי בטיחות השימוש ב־Silk'n SensEpil™ בעבורך, מומלץ להיוועץ עם רופא המשפחה או רופא עור.


- יש להרחיק את ידית הטיפול סן העור אם העור או ידית הטיפול חמים מדי.
- לעולם אין להשתמש בנוזלים דליקים, כגון אלקוהול (כולל בשמים, מחטאים או חומרים אחרים המכילים אלקוהול) או אצטון, לניקוי העור לפני הטיפול ב־Silk'n SensEpil™.
- השימוש ב־Silk'n SensEpil™ עשוי לגרום שינויים חולפים בפיגמנטציה (יש לעיין בסעיף "תופעות לוואי אפשריות" להלן).
- יש לשמור על המכשיר מחוץ להישג ידם של ילדים. אין לטפל ב־Silk'n SensEpil™ בילדים ואין להרשות להם להשתמש בו.


7. הפחתת הסיכון לפציעה

- כמו בכל מכשיר חשמלי, יש לנקוט אמצעי זהירות מסוימים כדי שהשימוש ב־Silk'n SensEpil™ יהיה בטוח.
- יש להרחיק את Silk'n SensEpil™ ממים!
- Silk'n SensEpil™ הוא מכשיר חשמלי. יש לשמור עליו תמיד הרחק ממים.
- אין להחזיק את Silk'n SensEpil™ במקום בו הוא עלול ליפול או להידחף אל אמבט, כיור או כלי אחר המכיל מים. אין להכניס אותו או להפיל אותו לתוך מים או כל נוזל אחר.
- הדבר עלול לגרום להתחשמלות חמורה.
- אין להשתמש ב־Silk'n SensEpil™ בזמן רחצה.
- אין להשתמש ב־Silk'n SensEpil™ אם הוא לח או רטוב.
- אין לגעת ב־Silk'n SensEpil™ אם נפל לתוך מים.
- אם Silk'n SensEpil™ נפל לתוך מים יש לנתק אותו מן החשמל מיידית.

6. אמצעי זהירות - כיצד משתמשים ב־Silk'n SensEpil™ בצורה בטוחה?

- יש לבחור את רמת העוצמה בזהירות!
- רמת העוצמה מתייחסת לריכוז הבזק האור המוקרן על עורך בזמן השימוש, מן החלשה ביותר (-) לחזקה ביותר (+). נוריות חייו העוצמה על לוח הבקרה מתארות את רמת העוצמה אליה מכוון המכשיר. ככל שעולה רמת העוצמה כך גם תוצאות הטיפול ב־Silk'n SensEpil™, וכן הסיכונים של תופעות לוואי (יש לעיין ב"תופעות לוואי אפשריות" בהמשך).
- יש להתחיל תמיד את הטיפול הראשון ברמת העוצמה החלשה ביותר (נורית אחת במצב "-")!
- רק אם תחושת אי-נוחות במשך הטיפול או אחריו קטנה או אינה קיימת ברמת העוצמה החלשה ביותר, אפשר להעלות את רמת העוצמה בנורית חייו אחת בטיפול הבא ב־Silk'n SensEpil™, וכך הלאה בכל טיפול בהמשך.
- מידע נוסף על רמת העוצמה יש לעיין בסעיף "רמת העוצמה" ב"הטיפול הראשון ב־Silk'n SensEpil™" בהמשך.
- **מנעי תופעות לא רצויות!**
- אין לטפל באותו אזור יותר מפעם אחת בכל טיפול!
- יש להימנע מחפיפה בין הבזקים!
- אם סופיעות על העור כוויות או שלפוחיות יש להפסיק את הטיפול באופן מיידי!
- **מנעי סיבוכים לאחר השימוש ב־Silk'n SensEpil™**
- אין לחשוף את העור באזורים המסופלים לשמש!
- חשיפה לשמש כוללת חשיפה לשמש ישירה ללא הגנה למשך יותר מ-15 דקות ברציפות, או חשיפה ללא הגנה לאור שמש במשך שעה ברציפות. להגנה על העור לאחר הטיפול בעת חשיפה לשמש יש לוודא שימוש מקיף בקרם הגנה בדרגת SPF 30 או יותר, למשך שבועיים לאחר כל טיפול הסרת שיער. לפני השימוש ב־Silk'n SensEpil™ יש לגלח תמיד את האזור המיועד לטיפול ולוודא כי העור נקי ויבש.
- יש לכסות נתמי-לידה וקרקועים לפני השימוש ב־Silk'n SensEpil™.
- יש לכסות נקודות חוסות או שחורות, כגון נתמי-לידה, נמשים, שומות או יבלות לפני השימוש ב־Silk'n SensEpil™.
- לעולם אין להביט ישירות באור המגיע מידית הטיפול וכן הראש המתכלה של Silk'n SensEpil™.
- אין להשתמש ב־Silk'n SensEpil™ באזורי הפטמות ואברי הסין (גבריים או נשיים).
- אין להשתמש ב־Silk'n SensEpil™ באזורי גוף בהם ייתכן שיער נשעיר יהיה רצוי מאחר יותר.
- אין להשתמש ב־Silk'n SensEpil™ לשום מטרה אחרת מלבד הסרת שיער.
- לעולם אין לכוון את ידית הטיפול בניסיון להפיק הבזק אור לחלל האוזר. יש לוודא תמיד כי ידית הטיפול מכוונת אל העור ונמצאת עמו במגע בזמן הטיפול.

- יש להרחיק את Silk'n SensEpil™ ממים! 
- לעולם אין לפתוח את Silk'n SensEpil™! אין לנסות לפתוח או לתקן את המכשיר. פתיחת המכשיר עלולה לחשוף אותך לרכיבים חשמליים מסוכנים ולעוצמת הבזק אור, שכל אחד מהם עלול לגרום נזק גופני חמור ו/או פגיעה בלתי הפיכה בעיניים.

- אין לנסות לפתוח או לתקן את מכשיר Silk'n SensEpil™. רק מרכזי התיקון המורשים של Silk'n SensEpil™ רשאים לבצע תיקונים. 
- ניסיון לפתוח את Silk'n SensEpil™ עלול גם לפגום במכשיר ולבטל את תוקף האחריות. יש להתקשר אל מרכז השירות של Silk'n SensEpil™ אם ברשותך מכשיר שבור או טעון תיקון.
- יש להשתמש ב־Silk'n SensEpil™ רק למטרה אליה נועד, כפי שמתואר במדריך זה.
- אין להניח לעולם את Silk'n SensEpil™ ללא הגשחה כשהוא מחובר לשקע חשמלי.
- אין להשתמש ב־Silk'n SensEpil™ אם ניזוק חוט החשמל, יש להרחיק את חוט החשמל ממשטחים חמים.
- אין להשתמש ב־Silk'n SensEpil™ אם רואים או מריחים עשן בזמן פעולתו.

- אין להשתמש ב־Silk'n SensEpi™ אם אינו פועל כשורה או אם הוא ניזוק.
- אין להשתמש ב־Silk'n SensEpi™ אם המאורר שבידיה הטיפול סדוק, מתפרק או חסר.
- אין להשתמש ב־Silk'n SensEpi™ אם אישן צבע העור בידיה הטיפול סדוק או שבור.
- אין להשתמש ב־Silk'n SensEpi™ אם מעטפת המכשיר סדוקה או מתפרקת.
- אין להשתמש ב־Silk'n SensEpi™ אם הראש המתכלה פגום, או שהעדשה האופטית סדוקה, מנופצת או חסרה.
- יש תמיד לנתק את Silk'n SensEpi™ מזרם החשמל מיד בתום השימוש.
- יש לנתק את Silk'n SensEpi™ לפני ניקוי.
- אין להשתמש ב־Silk'n SensEpi™ בצירוף אביזרים או חלקים שאינם מומלצים ע"י הום סקינוביישנס בע"מ.

8. תופעות לוואי אפשריות לשימוש ב־Silk'n SensEpi™

בשימוש על פי ההנחיות, תופעות לוואי וסיבוכים הקשורים ל־Silk'n SensEpi™ הם נדירים. עם זאת, בכל טיפולי היופי, גם אלה המיועדים לשימוש ביתי, טמונה דרגה כלשהי של סיכון. לכן עלך להבין ולקבל את הסיכונים והסיבוכים העלולים לקרות בטיפול להסרת שיער באור בתנאים ביתיים.


שימוש לא נכון במכשיר	הסבירות לכך	תוצאה בלתי רצויה	הסבירות לתוצאה בלתי רצויה
הצטברות או חפיפה של מספר הבזקים על נקודה אחת בעור	מזערית	חוסר נוחות מזערי	מזערית
		אדמוסיות מזערית	מזערית
		עלייה ברגישות העור	מזערית
		פצעים וכוויות בעור	נדירה
		צילוק	נדירה
		שינויים בצבע העור	נדירה
		אדמוסיות ונפיחות רבה	נדירה
		זיהום	זניחה
		חבורות	זניחה

- **חוסר נוחות מזערי.** למרות שטיפול באור להסרת שיער ביתי נסבלת בקלות בדרך כלל, מרבית המשתמשים חשים אי-נוחות מסוימת במהלך השימוש, המתוארת באופן כללי כעקצוץ בינוי על שטח העור המטופל. תחושת העקצוץ נמשכת בדרך כלל במשך זמן הטיפול או במשך כמה דקות לאחריו. כל תחושה קשה יותר מחוסר הנוחות המזערי זהה אינה רגילה ופירושה הדבר כי עלך לעצור את הטיפול ב־Silk'n SensEpi™ מפני שאין ביכולתך לשאת טיפול להסרת שיער, או שנקבעה דרגת עוצמה חזקה מדי.
- **אדמוסיות בעור.** עורך עלול להאדים מיד לאחר הטיפול ב־Silk'n SensEpi™ או תוך 42 שעות מן הטיפול ב־Silk'n SensEpi™. האדמוסיות נעלמת בדרך כלל תוך 42 שעות. יש לפנות לרופא אם האדמוסיות אינה נעלמת תוך יומיים-שלושה.
- **עלייה ברגישות העור.** אזור העור המטופל הופך רגיש יותר, ולכן יש אפשרות לתופעת יובש או קשקשים על העור.
- **פצעים וכוויות בעור.** לעיתים נדירות ביותר עלולים להיגרם כוויות ופצעים בזמן הטיפול. כוויה או פצע דורשים מספר שבועות להחלמה, ובמקרים יוצאים מן הכלל עלולים להשאיר צלקת קבועה.


- **צילוק.** גם אם רק במקרים נדירים, צילוק קבוע עלול להתרחש. כאשר מתרחש צילוק בדרך כלל הוא ניכר כפצע לבן ושוטח על העור (היפורפי). עם זאת, ייתכן ויהיה גדול ואדום (היפרטרופי) או גדול ומורחב מעבר לגבולות הפצע עצמו (קלואידי). טיפולים אסתטיים נוספים עשויים להידרש על מנת לשפר את מראה הצלקת.
- **שינויים בצבע העור.** Silk'n SensEpi™ מכוון אל השערות, בייחוד אל תאי הפיגמנט בזקיקי השיער עצמם. עם זאת קיים סיכון לשינוי זמני בצבע העור - היפרפיגמנטציה (עלייה או דהייה של פיגמנט חום) או היפופיגמנטציה (הלבנה) בסביבת העור המטופל. הסיכון לשינוי בצבע העור גדול יותר אצל בעלי גוון עור כהים. בדרך כלל דהייה או שינויים בצבע העור הם חולפים, ומקרי היפרפיגמנטציה או היפופיגמנטציה מתרחשים לעתים נדירות.
- **אדמוסיות ונפיחות רבה.** במקרים נדירים עשוי העור המטופל להפוך מאוד אדום ונפוח. תופעה זו נפוצה יותר באזורים הרגישים של הגוף. האדמוסיות והנפיחות אמורות להיעלם תוך יומיים עד 7 ימים ויש לטפל בהן בהנחות תכופות של קרח. גם ניקוי קל הוא אפשרי אך יש להימנע מחשיפה לשמש.
- **זיהום.** זיהום בעור הוא נדיר ביותר, אך הוא סיכון אפשרי כהמשך לכוויה או פצע שנגרמים לעור ע"י Silk'n SensEpi™.
- **חבורות.** במקרים נדירים מאוד, השימוש ב־Silk'n SensEpi™ עלול ליצור חבורות כחולות-סגולות, ואלה יכולות להישאר 5 עד 10 ימים. כשהחבורות מחלימות עשוי להופיע שינוי בעור בצבע חום-חלודה (היפרפיגמנטציה) שעשוי להיות קבוע.

9. הדרך של Silk'n SensEpi™ להסרת שיער לטווח ארוך


Silk'n SensEpi™ הוא מכשיר אישי להסרת שיער באור לטווח ארוך. תהליך הסרת השיער בליזר ובאור, מוכר היטב וממוסד. הוא הוכח בשימוש קליני ברחבי תבל כבר למעלה מ-15 שנים כדרך בטוחה ויעילה להשיג הפחתת שיער בטווח ארוך.

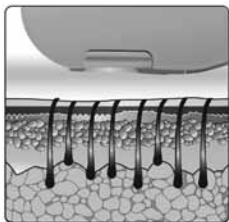

לאחר השימוש ב־Silk'n SensEpi™

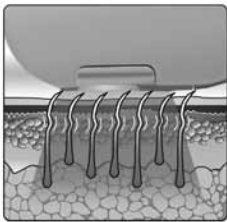

בזמן השימוש ב־Silk'n SensEpi™

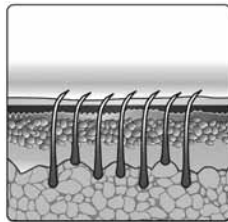

לפני השימוש ב־Silk'n SensEpi™

9.1 כיצד אור מסיר שיער?

הסרת שיער באור מבוססת על עיקרון של הרס סלקטיבי ונקודתי של תאים או רקמות, שבו עושים שימוש בעוצמת האור כדי למנוע צמיחת

שיער. על סנת להגיע לתוצאה טרסית כזאת על השיער לספוג סלקטיבית אור בעוצמה ולהפוך אותו לחום. תוצאה זו מושגת כאשר עוצמת האור המגיעה אל הרקמה נספגת בעיקר על ידי הפיגמנטים בשיער, בזמן שהעור והרקמות הסמוכות נשארים קרים. מלנין הוא פיגמנט האחראי על ספיגת האור בשיער, היוצרת את החום המונע, בסופו של דבר, את צמיחת השיער. ככל שיש בשיער יותר מלנין (כלומר, השיער כהה יותר) יותר אור עשוי להיספג והסרת השיער תהיה יעילה יותר.



סולגן - שלב מנוחה




קטגן - שלב ביניים



אנגן - שלב צמיחה

9.2 כיצד משפיע מחזור הצמיחה של השיער על הסרת השיער באורך?

כל שיערה בגופנו עוברת 3 שלבים במחזור צמיחתה: אנגן, קטגן וסולגן. לשלבים אלה יש השפעה רבה על תהליך הסרת השיער באורך. אנגן הוא שלב הצמיחה של השיער, בעוד קטגן וסולגן הם שלבי מנוחה. הזמן הדרוש להשלמת מחזור צמיחה שלם של השיער משתנה מאדם לאדם ובהתאם לסיקום השיער בגוף, אבל בדרך כלל הוא נמשך 18-24 חודשים. בכל זמן נתון מרבית זקיקי השיער בכל שטח העור נמצאים במצב מנוחה. שיער במצב זה אינו מושפע מ-Silk'n SensEpi™.

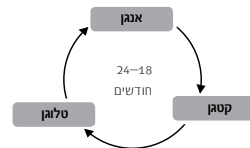

עם זאת, השיער בשלב הצמיחה יגיב לטיפולים ב-Silk'n SensEpi™. חשוב להבין כי תוצאה של הסרה מוחלטת של השיער עשויה לדרוש משך זמן של מחזור צמיחה שלם ב-Silk'n SensEpi™.

9.3 כדאי לתכנן את הסרת השיער באמצעות Silk'n SensEpi™ להשגת תוצאות הטובות ביותר

מחזור צמיחה שלם יכול להימשך 18-24 חודשים. בזמן זה ייתכן ויידרשו טיפולים חוזרים ב-Silk'n SensEpi™ להשגת הסרת שיער לטווח ארוך. יעילות הסרת השיער משתנה מאדם לאדם בהתאם לאזורי הגוף, צבע השיער ואופן השימוש ב-Silk'n SensEpi™.

- 3-4 הטיפולים הראשונים ב-Silk'n SensEpi™ יהיו במרווחים של שבועיים בערך זה מזה.
 - טיפולים 5-7 ב-Silk'n SensEpi™ יהיו במרווחים של 4 שבועות בערך זה מזה.
 - לאחר מכן משתמשים בדרך כלל ב-Silk'n SensEpi™ מפעם לפעם, אם וכאשר יש צורך, עד שמושגות התוצאות לטווח ארוך.
- זהו לוח הזמנים המומלץ לטיפול, כפי שהוכח כיעיל להשגת התוצאות הטובות ביותר, אך כל אדם יכול לתכנן את לוח הזמנים באופן שונה ולהגיע לתוצאות משיבועיות רצון.

יש לשים לב לכך שטיפול באזור בגוף למעלה מפעמיים תוך שבועיים לא ישפר את תוצאות הסרת השיער.

טיפול אופייני ב-Silk'n SensEpi™ לאחר השגת התוצאות לטווח ארוך:

כתוצאה משינויים הורמונאליים או פיזיים עלולים זקיקי שיער רדומים להפוך פעילים. ייתכן צורך בטיפולים נוספים ב-Silk'n SensEpi™ מפעם לפעם.

תוצאות צפויות בטיפול להסרת שיער

יעילות (%) של הסרת שיער/צמיחה (מחודשת) ¹	מספר הטיפולים הממוצע	אזורים אנטומיים של הגוף ²	חשיפה קלה [J/cm ²]	צבע השיער	מפני סוג העור על פי פיזצטריק
60% הפחתת שיער	טיפולים 10-12, במרווחים של ארבעה שבועות בערך	חלק עליון או תחתון של הרגל זרועות קו הביקיני בתי שחי	3-4.5	חום בהיר עד חום	I-IV
50% הפחתת שיער					
60% הפחתת שיער					
55% הפחתת שיער	טיפולים 8-10, במרווחים של ארבעה שבועות בערך	חלק עליון או תחתון של הרגל זרועות קו הביקיני בתי שחי	3-4.5	חום עד שחור	I-IV
70% הפחתת שיער					
60% הפחתת שיער					
70% הפחתת שיער					
65% הפחתת שיער					


¹ תגובה אישית תלויה בסוג השיער וכן בגורמים ביולוגיים העשויים להשפיע על תבניות הצמיחה.

² אין לצפות להסרת שיער לטווח ארוך בסדרת טיפולים אחת או אפילו שתיים. משך תקופת המנוחה של זקיקי השיער תלויה גם באזור בגוף.

10. הצעדים הראשונים עם Silk'n SensEpi™

10.1 הרכבת Silk'n SensEpi™

- יש להוציא את יחידת הבסיס של Silk'n SensEpi™, ידית הטיפול וחלקים אחרים של Silk'n SensEpi™ מן האריזה.
- יש לבדוק אם הראש המטלה מוכנס כראוי אל ידית הטיפול.
- יש לחבר את חוט החשמל אל השקע של Silk'n SensEpi™ ביחידת הבסיס.
- יש לחבר את הקצה השני של חוט החשמל אל שקע חשמלי. נורית חיווי מסתין תידלק. Silk'n SensEpi™ מוכן כעשוי להפעלה.

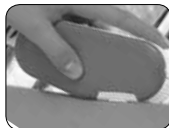

10.2 הטיפול הראשון עם Silk'n SensEpi™

- על העור להיות מגולח, נקי, יבש ונטול כל אבקה, מונועי הזעה או דאודורנטים.
- יש ללחוץ על סגה הפעל/המתן. נורית חיווי פועל תידלק וקול המאורר (דומה לקולו של מייבש-שיער) יישמע.
- בברך 3.5 שניות אחרי הלחיצה על סגה הפעל נורית החיווי מוכן להבדק תידלק ויישמע צפצוף. המכשיר מוכן כעשוי לשיגור ההבדק הראשון.
- אם העוצמה צריכה להיות ברמה גבוהה מן הנמוך ביותר, יש ללחוץ על כפתורי קביעת העוצמה באמצעות "+" או "-" (כדי העלאת או להוריד את דרגת העוצמה, עד שמושגת העוצמה המבוקשת. נוריות חיווי העוצמה יתאימו לדרגת העוצמה. (יש לעיין בססגרת "דרגת העוצמה").

8. יש להניח את ידי הטיפול ביציבות על העור ולשים לב שהעור חלק וישר. יש לוודא שראש ידי הטיפול נמצא במגע מלא עם העור.
 9. יש ללחוץ על ההדק. עם הלחיצה על ההדק אפשר יהיה להבחין בהבזק בהיר של אור.
 אם צבע העור בהיר מספיק לטיפול בטוח המכשיר ישגר הבזק אור אל העור.
 עם הלחיצה על ההדק אפשר יהיה להבחין בהבזק בהיר של אור ובאותו זמן לשמוע צפצוף שהוא צליל תקין למכשיר. תתכן תחושה של חום ועקצוץ ברסה בינונית.
 Silk'n SensEpi™ יתחיל מיד לטעון את עצמו להבזק הבא. אחרי 3.5 שניות נורית חווי המוכן להבזק תדלק שוב והמכשיר יצפץ.

אם אינך רואה הבזק אור ונורית האזהרה לגוון העור מהבהבת 3 שניות, צבע העור שלך כפי שסנמדי ע"י חיישן צבע העור, כהה מדי לטיפול בטוח. יש לנסות להשתמש במכשיר באזור אחר של הגוף או להתקשר אל מוקד התימחה של Silk'n SensEpi™ (יש לעיין במסגרת "חיישן צבע העור")

10. יש להסיר את ראש ידי הטיפול מן האזור המטופל.

11. יש להעביר את ראש ידי הטיפול לאזור אחר בעור.
 אפשר להשתמש בסימני הלחיצה שהשאיר המכשיר על העור כדי להניח נכון את המכשיר להבזק הבא, כך שימנעו פערים ו/או חפיפה בין הבזקים (יש לעיין במסגרת "כיסוי אזורי עור").

אזהרה: אין לטפל באותו אזור בעור יותר מפעם אחת באותו יום. טיפול באותו אזור יותר מפעם אחת באותו יום מגביר את הסיכון לתוצאות בלתי רצויות.

12. יש לחזור על התהליך שוב משלב מספר 5.

דרגת העוצמה

דרגת העוצמה קובעת את עצימות הבזק האור של Silk'n SensEpi™ המשוגר אל העור, מן הרמה הנמוכה ביותר (-) עד הגבוהה ביותר (+). נורית חווי תואמת על לוח הבקרה מייצגות את העלייה בדרגת העוצמה. ככל שדרגת העוצמה גבוהה יותר כך גם תוצאות הסרת השיער והסיכון לתופעות לוואי וסיבוכים אפשריים. אם במהלך הטיפול בדרגת העוצמה הנמוכה ביותר או לאחריו יש תחושת אי נוחות קלה בלבד, יש להעלות לדרגת העוצמה הבאה, בטיפול הבא. באותו אופן ניתן להמשיך ולהעלות את דרגת העוצמה גם בטפולים הבאים.

אין להעלות את דרגת העוצמה אם קיימת תחושת אי נוחות חריגה במשך הטיפול ב-Silk'n SensEpi™ או אחריו!
 (יש לעיין "תופעות לוואי אפשריות")
אין להעלות את דרגת העוצמה במשך הטיפול בהסרת השיער אפילו אם אין כל תחושת אי נוחות. אי נוחות יכולה להופיע גם זמן מה לאחר הטיפול.

בכל פעם ש-Silk'n SensEpi™ מופעל, עצמת האנרגיה שלו נקבעת אוטומטית מחדש לדרגה הנמוכה ביותר. רק נורית חווי עצמה אחת תדלק. לביטחונך בזמן השימוש ב-Silk'n SensEpi™ בפעם הראשונה המערכת מכוונת אוטומטית לשגר את 50 ההבזקים הראשונים בדרגת העוצמה הנמוכה ביותר ו 200 הבאים עד רמה 3.

כדי לבטל מגבלת בטיחות זו יש ללחוץ ולהחזיק את כפתורי קביעת העוצמה "4" ו "3" במקביל עד לשמיעת שני צפצופים רצופים. כדי לשחרר את מגבלת בטיחות זו יש להחזיק את כפתורי קביעת העוצמה "4" ו "3" במקביל עד לשמיעת שלושה צפצופים רצופים.

חיישן צבע העור

הסרת שיער באמצעות אור על עור בגוון כהה יכולה לגרום לתוצאות בלתי רצויות כמו כוויות, שלפוחיות ושינויים בצבע העור (הפיר- או היפו- פיגמנטציה).
 כדי למנוע שימוש מוטעה, חיישן צבע עור ייחודי ב-Silk'n SensEpi™ מודד את צבע העור המיועד לטיפול בתחילת כל טיפול ולעיתים במשך הטיפול. אם חיישן צבע העור מוצא גוון שהוא כהה מדי לטיפול ב-Silk'n SensEpi™ המכשיר יפסיק אוטומטית לשגר הבזקים. אם אינך רואה הבזק אור ונורית אזהרה לגוון העור מהבהבת 3 שניות, זהו סימן שצבע העור שלך, כפי שסנמדי ע"י חיישן צבע העור, כהה מדי לטיפול בטוח. יש לנסות את המכשיר על חלק אחר בגוף או להתקשר למוקד התימחה של Silk'n SensEpi™.



כיסוי אזורים בעור

מוסלף להתקדם עם Silk'n SensEpi™ על העור בטורים, להתחיל בקצה אחד ולהתקדם בהדרגה לעבר הקצה השני. שיטה זו מאפשרת בקרה טובה יותר של כיסוי אזורים בעור, ומסייעת במניעת טיפול כפול באותו מקום או חפיפה בין אזורים בעור. כאשר הוא מוצמד לעור ראש ידי הטיפול בנוי ליצור סימני לחץ זמניים על האזור המטופל. סימנים נראים אלה יכולים לשמש לייצוב נכון של ההבזק הבא.



יש להימנע מהבזקים חופפים!
 אין לטפל באותו אזור בעור יותר מפעם אחת בכל טיפול להסרת שיער!



אם מופיעות על העור שלפוחיות או כוויות יש להפסיק את הטיפול מיד!

10.3 למה לצפות בזמן הטיפול ב-Silk'n SensEpi™?

- יש מי ש-Silk'n SensEpi™ יהיה עבורם התנסות ראשונה במכשיר המבוסס על אור לשימוש ביתי. Silk'n SensEpi™ פשוט להפעלה, והטיפולים להסרת שיער יתקצרו בהדרגה. בזמן הטיפול ב-Silk'n SensEpi™ סביר לחוות או להרגיש:
- רגש מאוורר - מאוורר הקירור של Silk'n SensEpi™ מייצר רעש דומה לזה של מייבש שיער. כך צריך להיות.
 - צליל צפצוף עם כל הבזק - כאשר הבזק של אור מופעל סביר לשמוע צפצוף עדין במקביל להבזק האור.

- לחץ קל של ידיית הטיפול - לחץ זה נחוץ ומסייע למיקום המדויק של הבזקי האור.
- תחושת חמימות ועקצוץ - במשך כל הבזק אור סביר להרגיש תחושה קלה של חום ועקצוץ מעצמת האור.
- יש לזכור כי חשוב להשתמש תמיד בדרגת העצמה הנמוכה לטיפולים הראשונים. תתכן תחושת חמימות למשך של עד שעה אחרי הטיפול.
- אדמומיות קלה או ורדרדות - במשך ומיד אחרי הטיפול ב™ Silk'n SensEpi נראית לעתים קרובות אדמומיות קלה או ורדרדות של העור. תופעה זו ניכרת בדרך כלל סביב השערות עצמן.
- בכל מקרה שנראית אדמומיות מלאה של העור, שלפוחיות או כוויות יש להפסיק את הטיפול ב™ Silk'n SensEpi מיד.

10.4 לאחר הטיפול ב™ Silk'n SensEpi

- כאשר הושלם הטיפול ב™ Silk'n SensEpi יש לכבות את המכשיר ע"י לחיצה על סתג ההפעלה/כיבוי. (יש לזכור לאיזו רמה כוונה העצמה מפני שזו לא תשתחרר בהפעלה הבאה של ™ Silk'n SensEpi).
- יש להוציא את חוט החשמל משקע החשמל.
- אחרי כל טיפול להסרת שיער מומלץ לנקות את המכשיר ובייחוד את ראש ידיית הטיפול (יש לעיין: ניקוי ™ Silk'n SensEpi).
- אחרי הניקוי מומלץ לאחסן את המכשיר באריזה המקורית ולהרחיק אותו ממים.



טיפוח העור לאחר הטיפול להסרת השיער
אין לחשוף את האזורים המטופלים בעור לשמש. יש להגן על האזורים המטופלים בעור בקרם הגנה בתקופת הטיפול להסרת השיער ולפחות שבועיים אחרי הטיפול האחרון ב™ Silk'n SensEpi.

תופעות לוואי וסיבוכים

יש מטופלים שיכולים לחוות בצבע העור כתוצאה מהשימוש ב™ Silk'n SensEpi. סימנים כאלה, אם ישנם, הם בדרך כלל קלים וחולפים. במקרה של תחושת סיבון כלשהי (יש לעיין "תופעות לוואי אפשריות לשימוש ב™ Silk'n SensEpi") יש להתקשר מיד לרופא.



11. תחזוקת ™ Silk'n SensEpi

11.1 ניקוי ™ Silk'n SensEpi

- לאחר כל טיפול להסרת שיער, מומלץ לנקות את מכשיר ™ Silk'n SensEpi ובייחוד את ראש ידיית הטיפול.
- יש לנתק את ™ Silk'n SensEpi מן החיבור לחשמל לפני הניקוי.
- יש להשתמש בבד נקי ויבש ובתכשיר מיוחד לניקוי ציוד אלקטרוני כדי לנגב את פני השטח של ™ Silk'n SensEpi ובפרט את ראש ידיית הטיפול. לעולם אין לטבול את ™ Silk'n SensEpi או חלקים ממנו במים!

11.2 החלפת הראש המתכלה

הראש המתכלה של ™ Silk'n SensEpi יכול לשגר 750 הבזקי אור שיכנסו בדרך כלל שתי רגליים, זרועות, בתי שחי וקו ביקיני.

עצמת ההבזק נקבעת בהתאם לכיוון דרגת העצמה במכשיר. אין ירידה בעצמה לכל אורך חיי הראש המתכלה. כאשר הראש המתכלה עבר 90% מסמך חייו האפשרי נורית חיוי להחלפת הראש המתכלה על לוח הבקרה תתחיל להבהב על מנת לציין כי הראש המתכלה צריך להיות מוחלף בקרוב.

לאחר השימוש בכל 750 ההבזקים של הראש המתכלה נורית החיוי להחלפת הראש המתכלה תהיה דולקת באופן קבוע כדי לציין שאין אפשרות לשגר עוד הבזקים.

על מנת להמשיך בטיפול להסרת שיער, יהיה עכשיו צורך לחליף את הראש המתכלה.



שימו לב: יש להחליף ראש מתכלה גם אם כתמים גדולים מופיעים בתוכו או שהעדשה שלו שבורה

החלפת הראש המתכלה:

1. יש ללחוץ על כפתור ההפעלה/כיבוי כדי לכבות את מכשיר ™ Silk'n SensEpi.
2. יש לנתק את חוט החשמל מן השקע
3. יש לאחוז בראש המתכלה הישן בשני צדדיו, לשלוף אותו מסקומו ולהשליך אותו עם האשפה הביתית.
4. יש להוציא ראש מתכלה חדש מאריזתו.
5. יש לדחוף את הראש המתכלה החדש בעדינות למקומו.



12. פתרון בעיות


12.1 "מכשיר ™ Silk'n SensEpi שלי אינו פועל"

- יש לוודא כי חוט החשמל מחובר כראוי אל מכשיר ™ Silk'n SensEpi.
- יש לוודא כי חוט החשמל מחובר כראוי לשקע החשמלי בקיר.

12.2 "אין הבזק אור כאשר לוחצים על ההדק"

- יש לוודא שיש מגע טוב עם העור וכי ראש ידיית הטיפול צמוד בלחץ שווה אל העור. לבטיחותך, ההדק יפעיל הבזק רק אם ראש ידיית הטיפול צמוד היטב אל העור.
- יש לבדוק את לוח הבקרה. אם נורית האזהרה לגוון העור מהבהבת 3 שניות זהו סימן כי עורך, כפי שנמדד ע"י חיישן צבע העור, כהה מדי לטיפול בטוח. יש לנסות את השימוש באזור אחר של הגוף או להתקשר אל מרכז התמיכה של ™ Silk'n SensEpi.
- יש לבדוק את נורית החיוי להחלפת הראש המתכלה. אם היא דולקת יש לנתק את המכשיר מן החשמל ולהחליף את הראש המתכלה.
- יש לוודא כי נורית חיווי מוכן להבזק דולקת.
 - א. אם תוך 10 שניות נורית חיווי מוכן להבזק עדין כבוייה, יש לכבות את המכשיר ולהדליק אותו שוב בלחיצה כפולה על סתג הפעלה/המתן.
 - ב. אם הבעיה נמשכת, יש להתקשר אל מרכז שירות הלקוחות הקרוב של ™ Silk'n SensEpi.

- יש לבדוק את נורית האזהרה על תקלה דולקת
- אם הנורית דולקת יש לכבות את המכשיר ולהדליק אותו שוב בלחיצה כפולה על מתג ההפעלה/כיבוי.
- א. אם הבעיה נמשכת, יש להתקשר אל מרכז שירות הלקוחות הקרוב של Silk'n SensEpil™.
- אם בעיות אלה נמשכות, יש להתקשר אל מרכז שירות הלקוחות הקרוב של Silk'n SensEpil™.

 אין לנסות ולפתוח או לתקן את מכשיר ה-Silk'n SensEpil™. רק מרכזי התיקון המורשים של Silk'n SensEpil™ רשאים לבצע תיקונים.

פתיחת מכשיר ה-Silk'n SensEpil™ עלולה לחשוף אותך למרכיבים חשמליים מסוכנים ולעוצמת הבזק אור, וכל אחד מהם עלול לגרום נזק גופני חמור או פגיעה קבועה בעיניים.
פתיחת המכשיר עלולה לגרום נזק למכשיר, ולבטל את תוקף האחריות שבידך.
יש להתקשר אל מרכז שירות הלקוחות אם ברשותך מכשיר שבור או טעון תיקון.

13. שירות לקוחות

למידע נוסף על מוצרי Silk'n אפשר להיכנס לאתר www.sensepil.co.il
אם המכשיר שברשותך נשבר, נפגע, טעון תיקון או לצורך כל סיוע אחר, יש לפנות אל מרכז שירות הלקוחות בטלפון 1-700-700-309, או לכתוב ל contact@sensepil.co.il.

14. שאלות נפוצות

1. האם Silk'n SensEpil™ באמת עובד?
כן. במחקרים קליניים שנערכו ע"י רופאים, הוכח כי Silk'n SensEpil™ אכן מסיר שערות בבטחה לטווח ארוך.
2. באיזה מקומות על גופי אוכל להשתמש ב-Silk'n SensEpil™?

Silk'n SensEpil™ תוכנן להסרת שיער בכל הגוף. אזורי הגוף הנפוצים ביותר לטיפול הם: הרגליים, בתי השחי, הזרועות קו הביקיני והפנים. Silk'n SensEpil™ אינו מתאים לכל אדם. אנו מסליצים לך לקרוא את כל האזהרות ואמצעי הזהירות במדריך למשתמש.

3. כמה זמן נמשך טיפול ב-Silk'n SensEpil™?
הזמן יכול להשתנות בהתאם לאזור שטופל בגוף. טיפול לכל אורך הרגל יכול להימשך עד 30 דקות, טיפול בשני בתי השחי

יכול להימשך 10 דקות. Silk'n SensEpil™ מופעל בחשמל, ולכן ניתן להשתמש בו לכל משך הזמן הנחוץ להשלמת הסרת השיער מחלקי(י) הגוף הרצוי(ים).

4. האם Silk'n SensEpil™ בטוח?
Silk'n SensEpil™ תוכנן עם דגש רב על בטיחות, נבדק ואושר על ידי רופאי עור מומחים ומנתחים פלסטיים כדי לעמוד בסטנדרטים שלהם לבטיחות ההתקן לשימוש ביתי. עם זאת, כמו כל מכשיר אלקטרוני או מוצר הסיועד לטיפול בעור יש להשתמש בו לפי הוראות ההפעלה והאזהרות למשתמש.

5. האם Silk'n SensEpil™ מכאיב?
מרבית המשתמשים ב-Silk'n SensEpil™ בהתאם להוראות דיווחו על תחושה קלה של חום בזמן הבזק האור. בעלי שיער עבה וכהה יותר עשויים לחוש יותר בחוסר נוחות, אבל זו פוחתת עם השלמת הטיפול. לנחותך יש ל-Silk'n SensEpil™ חמש רמות הגדרה הניתנות להתאמה על פי הרגישות שלך.

6. באיזו תדירות יש להשתמש ב-Silk'n SensEpil™?
הטיפולים ב-Silk'n SensEpil™ צריכים להיעשות במרווחים שבועיים במשך שלושה עד ארבעת הספולים הראשונים. לאחר מכן על הטיפול להיעשות אם השערות חזרו וצמחו, עד שמושגות התוצאות הרצויות.

7. האם Silk'n SensEpil™ יעיל בהסרת שיער לבן, אפור או בלונדי?
Silk'n SensEpil™ יעיל ביותר בהסרת סוגי השיער הכהים, או שיער המכיל יותר מלנין. מלנין הוא הפיגמנט המקנה לעור ולשיער את צבעם, והוא אשר יספוג את האור. לשיער שחור או כהה התגובה החזקה ביותר, גם שיער חום או חום בהיר יגיב לטיפול, אם כי בדרך כלל ידרש מספר טיפולים גדול יותר. שיער אדמוני עשוי להגיב לעיתים. שיער לבן, אפור או בלונדי אינו מגיב בדרך כלל, אך לעתים יש תוצאות לאחר טיפולים חוזרים.

8. האם ניתן להשתמש ב-Silk'n SensEpil™ על עור חום או שחור?
אין לנסות טיפול ב-Silk'n SensEpil™ על עור כהה מטבעו! המכשיר לא יפעל!

Silk'n SensEpil™ הוא מכשיר מבוסס אור, אשר מסיר שיער לא רצוי על ידי טיפול סלקטיבי בפיגמנט השערות. כמויות משתנות של פיגמנט קיימות גם ברקמות העור שמסביב. כמות הפיגמנט בעורו של אדם מסוים, אשר באה לביטוי בגוון העור, קובעת את מידת היכולת אליו הם נחשפים בטיפול ב-Silk'n SensEpil™. טיפול בעור כהה באמצעות מערכות מבוססות אור להסרת שיער עלול לגרום תופעות לוואי כגון כוויות, שלפוחיות, שינויים בצבע העור (היפר או היפו-פיגמנטציה). ב-Silk'n SensEpil™ כלול חיישן צבע עור המודד את גוון העור בתחילת כל טיפול ולעתים גם במשך הטיפול. כאשר הוא מגלה עור שהוא כהה מדי לטיפול, מבטל החיישן את יכולתו של Silk'n SensEpil™ לשגר הבזקים.

9. מתי אוכל לראות את תוצאות הטיפול ב-Silk'n SensEpil™?
כמו בכל הטיפולים מבוססי האור התוצאות אינן מיידיות, ולמעשה אי אפשר להבחין בשום שינוי. לעתים ייראה כאילו השיער חזר לצמוח אחרי הטיפול, אבל בדרך כלל הוא ינשר לאחר כשבועיים. בנוסף, לצמיחת השיער שלושה שלבים שונים, ורק שיער בשלב הצמיחה הפעיל יושפע מ-Silk'n SensEpil™. זו אחת הסיבות העיקריות לכך שנדרשים טיפולים חוזרים כדי להשיג את התוצאה הרצויה.

10. האם גברים יכולים להשתמש ב-Silk'n SensEpi™?

אף כי Silk'n SensEpi™ תוכנן במיוחד עבור נשים, הוא מתאים גם לשימוש על ידי גברים. עם זאת, השיער של גברים, בדרך כלל על החזה, ידרוש יותר טיפולי הסרת שיער מזה של הנשים כדי לקבל את התוצאות הרצויות.

11. מדוע השיער שלי חוזר וצומח, למרות שטיפלתי בו לפני שבוע?

לעיתים קרובות יראה השיער כאילו הוא ממשיך לצמוח במשך שבועיים אחרי טיפול להסרת שיער באמצעות Silk'n SensEpi™. התהליך ידוע בשם "פליטה", ואחרי כשבועיים ניתן לראות כי שערות אלו פשוט נשורות או נתלשות במשיכה קלה. (לא מומלץ לתלוש את השערות, אלא לתת להן לנשור באופן טבעי). ייתכן גם כי כמה שערות, לא הושפעו מן הטיפול ב-Silk'n SensEpi™ בגלל חוסר-דיוק או שלב צמיחה שונה. שערות אלה יטופלו בפעמים הבאות, וזו הסיבה שדרושים טיפולים חוזרים ב-Silk'n SensEpi™ על מנת להגיע לתוצאה הטובה ביותר.

12. האם נכונה השמועה שאחרי הטיפול באור צומח שיער דק ובהיר יותר?

זו תופעה מוכרת וידועה בקרב רופאים ומטפלים במכשירים מבוססי אור להסרת שיער. ייתכן כי מעט שיער דק ובהיר יותר יחזור ויצמח לאחר הטיפול ב-Silk'n SensEpi™. בדרך כלל זהו חלק מן השיער המקורי, והמשך הטיפול עשוי להסיר גם אותו.

13. מדוע הטיפול ב-Silk'n SensEpi™ אסור לאחר שזיוף?

14. להשתמש ב-Silk'n SensEpi™ על עור שזוף או לאחר חשיפה לשמש!

עור שזוף, ובפרט לאחר חשיפה לשמש, מכיל כמויות גדולות של הפיגמנט מלנין. זו קביעה נכונה לכל הצבעים וסוגי העור, כולל אלה שנראה כי אינם משתזפים בנקל. נוכחות של כמויות מלנין גדולות חושפת את העור לסיכון רב יותר של תוצאות בלתי רצויות בטיפול ב-Silk'n SensEpi™, ובהן כוויות, שלפוחיות ושינויים בצבע העור (היפר או היפו-פיגמנטציה).

14. האם שימוש ממושך ב-Silk'n SensEpi™ מסכן את עור?

השימוש במכשירים מבוססי אור ברפואה אסטטית מתועד היטב כבר יותר מ-15 שנים בפרסומים המקצועיים ובמכונים מוכוונים כמו סרפאט סאיו. בכל אלה לא דווח על שום תופעות לוואי או נזקים כתוצאה משימוש ארוך-טווח במכשירים מבוססי אור או לייזר.

15. האם אוכל להשתמש ב-Silk'n SensEpi™ כדי לטפל בשיער על הסנטר או במקומות אחרים על פני?

אפשר להשתמש ב-Silk'n SensEpi™ מאיזור הלחי ומטה. יש לנקוט בזהירות כפולה כאשר משתמשים ב-Silk'n SensEpi™ באיזור הפנים ולהזהר מפגיעה בעיניים. לעולם אין להשתמש ב-Silk'n SensEpi™ באיזור העיניים. כמו באזורים אחרים בגוף, יש להמנע מחשיפת איזור הפנים לשמש לפני ואחרי הטיפול ב-Silk'n SensEpi™. אמצעים מקובלים להגנה מהשמש הם ביגוד מגן או קרם הגנה מפני השמש (מעל SPF 50) במשך 3 שבועות לפני ואחרי טיפול.

16. כמה זמן יש לחכות אחרי חשיפת עור לאור הגנה לאור השמש לפני שאפשר להשתמש ב-Silk'n SensEpi™?

לאחר החשיפה לשמש יש לחכות 4 שבועות לפני השימוש ב-Silk'n SensEpi™. בכל מקרה בו אין בטחון לגבי החשיפה לשמש יש לפנות אל רופא או אל מרכז התמיכה בלקוחות של הום סקינוביישנס.

17. מה עלי לעשות לפני השימוש ב-Silk'n SensEpi™?

לפני כל טיפול ב-Silk'n SensEpi™ חשוב להימנע מחשיפה לשמש לפחות 4 שבועות. קרם הגנה ברמת סינון גבוהה (SPF +50) יסייע, כמו גם כיסוי בבגדים של אזורים המיועדים לטיפול. את העור המיועד לטיפול יש לנקות במים פושרים וסבון, ואת השיער יש לגלח עד גובה פני העור.

18. כיצד מטפחים את האזורים המטופלים לאחר השימוש ב-Silk'n SensEpi™?

את האזורים המטופלים ב-Silk'n SensEpi™ אפשר לטפח בכל המוצרים המקובלים לטיפול בעור. יש לתת תשומת לב מיוחדת להימנעות מחשיפה בלתי מוגנת לשמש. קרם הגנה ברמת סינון גבוהה (SPF +50) וכיסוי בבגדים יתאימו לשמירה מפני השמש.

19. האם עלי למרות את השיער לאחר הטיפול?

לא, השיער ינשור בהדרגה מאליו. תהליך זה עשוי להימשך עד שבועיים.

15. מפרט טכני

גודל ספוט	2 ס"מ x 3 ס"מ x 6 ס"מ (6 ס"מ ²)	
מהירות	הבדק בכל 3.5 שניות: 1.7 ס"מ ² /שנייה	
טכנולוגיה	Home Pulsed Light™	
רמת אנרגיה מרבית	5 גאול/ס"מ ²	
אורך הגל	475-1200nm	
זמן טעינה / מקור הכוח	פעולה רציפה	
דרישות חשמל	100-240VAC, 2A	
משך הזמן הדרוש לטיפול בחלק התחתון של הרגליים	30 דקות	
תפעול ובטיחות	חיישן חדש לצבע עור מבטיח שימוש רק עם עור בצבע מתאים. ראש בטיחות מאפשר את סרב הבטיחות והיעילות. קל לתפעול.	
מידות האריזה	13x22x1 ס"מ	
טמפרטורה	תפעול	10 עד 40°C
	אחסנה	-40 עד 70°C+
לחות יחסית	תפעול	30% עד 75%RH לחות יחסית
	אחסנה	10% עד 90%RH לחות יחסית
לחץ אטמוספרי	תפעול	700 עד 1060hPa יחידות
	אחסנה	500 עד 1060hPa יחידות

הצהרת התאימות של האיחוד האירופי

אנן, הום סקינביווייזנס בע"מ מצהירים באחריותנו הבלעדית כי מוצרי הטיפול הביתיים שם המותג: הום סקינביווייזנס שם הדגם מספר הדגם ASI01496A Silk'n ASI01500A SensEpil

תואמים על פי הנוהל את הדרישות הבסיסיות על פי EMC Directive 2004/108/EC ו Low Voltage Directive 2006/95/EC. הצהרה זו מבוססת על תאימות מלאה של מוצרים אלה לתקנים האירופיים:

- RF: EN 300330-1:(2002-12)
EN 300330-3:(2006-04)
- EMC: EN 61000-3-2:2000; (A2:2005)
EN 61000-3-3:1995; (A1:2001)
EN 55014-1:2000; (A2:2002)
EN55014-2:1997; (A1:2001)
EN 301489-1:(2004)
EN 301489-3:(2002)
- בטיחות חשמל: EN 60335-1:2002; (A1:2004;A12:2006)
EN 50415:2003

נציג מורשה: Duotec Medical GmbH, Dr. Kurt Huber Str. 6, D-82031 Grünwald, Germany
איש קשר: G.M. Hans Edel

יצרן: יוקנעם ת.ד. 533, יוקנעם 20692, ישראל טל.: 04-9097470, פקס: 04-9097471 | www.silkn.com info@silkn.com, contact@silkn.com




גבי לביא
מנכ"ל
יוקנעם, ישראל
יולי 2009 12



הנס אדל
מנכ"ל
אירופה
יולי 2009 12

HomeSkinovations

בניין תבור, שער יוקנעם ת.ד. 533, יוקנעם 20692, ישראל טל.: 04-9097470, פקס: 04-9097471
www.silkn.com info@silkn.com, contact@silkn.com

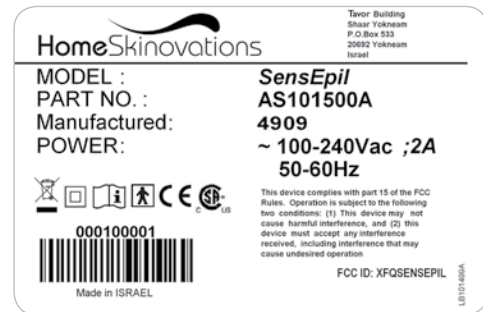

- סיווג בטיחותי II
- רמת ההגנה נגד התחשמלות: type BF applied part
- WEEE - פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני
- אין להשליך את המכשיר יחד עם אשפה ביתית רגילה, אלא רק לסתקן לאיסוף פסולת חשמלית ואלקטרונית
- CE Mark - המכשיר קיבל את אישור התקן של האיחוד האירופי
- יש לעקוב אחר הוראות ההפעלה
- מכשיר זה עומד בדרישות חלק 15 של כללי הוועדה האמריקאית הפדרלית לתקשורת (FCC)
- CSA - לארה"ב ולקנדה
- דרגת ההגנה נגד כניסת מים: רגילה
- מכשיר זה אינו מתאים לשימוש בנוכחות תערובת של חומר מאלחש דליק עם אוויר או חמצן או תחמוצת התקן.

ועדת התקשורת הפדרלית מידעת:

ציוד זה נבדק ונמצא תואם את המגבלות עבור התקן דיגיטלי Class B, בהתאם לחלק 15 של כללי ועדת התקשורת הפדרלית. מגבלות אלה נעודו לספק הגנה סבירה מפני הפרעה מזיקה תוך התקנה במגורים. ציוד זה מייצר, משתמש ויכול להקרין אנרגיה בתדר רדיו אם לא יותקן בהתאם להוראות, עשוי לגרום להפרעה מזיקה לתקשורת רדיו. עם זאת, אין ערובה לכך שבהתקנה סבוימת לא תתרחש הפרעה. אם סינון הציוד גורם להפרעה מזיקה בקליטת רדיו או טלוויזיה, כפי שניתן לקבוע על ידי כיבוי והדלקה לסירוגין, יכול המשתמש לנסות לתקן את ההפרעה על ידי אחד או יותר מהאמצעים הבאים:
(א) כיוון מחדש של אנטנת הקליטה. (ב) הגדלת המרחק בין המכשיר למקלט. (ג) קבלת יעוץ מסכנאי רדיו או טלוויזיה.
אזהרת ועדת התקשורת הפדרלית:
שינויים שלא אושרו על ידי היצרן עשויים לבטל את זכותו של המשתמש להפעיל את המכשיר על פי כללי ועדת התקשורת הפדרלית.

הפעלת Silk'n SensEpil™

1. יש להוציא את יחידת הבסיס, ידית הטיפול והמרכיבים האחרים מן האריזה.
2. יש לוודא כי הראש המתכלה מסומם כראוי בידיית הטיפול.
3. יש לחבר את חוט החשמל אל השקע ביחידת הבסיס.
4. יש לחבר את חוט החשמל אל שקע חשמלי. נורית חייווי מוכן להבזק תידלק. Silk'n SensEpil™ מוכן עכשיו לפעולה.

הטיפול הראשון ב-Silk'n SensEpil™

- על העור להיות מגולח, נקי, יבש ונטול אבקות, מונעי-הזעה ודאודורנטים.
5. יש ללחוץ על מתג ההפעלה/המתנה. נורית חייווי ההפעלה תידלק וקול המאוורר (דומה לקולו של מייבש-שיער) יתחיל להישמע.
 6. בערך 3.5 שניות אחרי הלחיצה על מתג "הפעל" נורית החיווי "מוכן להבזק" תדלק וישמע צפצוף. המכשיר מכוון את עצמו לשיגור הבזק אור בעוצמה החלשה ביותר. לאחר מכן מוכן המכשיר לשיגור הבזק הראשון.
 7. אם דרגת העוצמה צריכה להיות גבוהה מן החלשה ביותר, יש ללחוץ על כפתור קביעת העוצמה באמצעות "-". או "+" בהתאמה כדי להעלות או להוריד את העוצמה לדרגה הרצויה. נוריות חייווי העוצמה יתאימו לדרגת העוצמה שנקבעה. (יש לעיין במסגרת "דרגת העוצמה").
 8. יש להצמיד היטב את ידית הטיפול אל העור, ולוודא כי העור חלק וישר. יש לוודא כי ראש ידית הטיפול נמצא במגע מלא עם העור.
 9. יש ללחוץ על ההדק. המכשיר יתחיל בהגדרת צבע עורך. אם צבע העור מספיק בהיר לטיפול בטוח, ישגר המכשיר הבזק אור אל עורך. אפשר יהיה לראות את הבזק האור בהיר ובמקביל לשמוע צפצוף עדין, שהוא קולו הרגיל של המכשיר. תתכן תחושה קלה של חמימות או עקצוץ. Silk'n SensEpil™ יטען את עצמו מיד להבזק הבא. לאחר 3.5 שניות נורית חייווי מוכן להבזק תדלק שוב והמכשיר יצפצף.
 10. יש להרחיק את ראש ידית הטיפול מעל שטח העור המטופל.
 11. יש להעביר את ראש ידית הטיפול אל אזור אחר בעור. אפשר להיעזר בסימני הלחץ שהשאיר המכשיר על העור כדי למקם כראוי את ההבזק הבא, תוך הימנעות מפערים או חפיפה בין הבזקים (יש לעיין במסגרת "כיסוי אזורים בעור").
 12. יש לחזור על התהליך שוב, החל משלב 5.

